

植物研究に長年の実績!

微量精密分析の感度アップ!



立体8の字®原理による

商標登録第 6576850 号

秒速粉碎機

マルチビーズショッカー®

Multi-beads Shocker®

安価・タフな使い捨て容器内で植物、昆虫、微生物、土壌等の精密粉碎が可能!
各種サンプルの試料調整は、
マルチビーズショッカー®にお任せください!

安価・タフな樹脂製使い捨て容器の種類も充実。
(96well/2ml/3ml/10ml/22ml/50ml/50mlロング/100ml)
容器の洗浄の手間不要で時間短縮/経費節減に貢献。

一度に多数の試料を同一条件で粉碎可能、
かつ1試料でもランサー無しで粉碎可能。

常温、低温(-10~20.0℃等)、液体窒素条件下等、
粉碎温度の制御が可能。

粉碎容器/粉碎媒体の材質もステンレス、ジルコニア、
タンダステンカーバイドなど豊富なラインナップ。

コンピュータモータ(0~4,500rpm)により
1rpmごとの精密回転制御など豊富な制御が可能。



MB3000シリーズ

☑️ 卓上型・省スペース ☒ 極静音

植物生葉




粉碎時間
10秒
液体窒素
条件下



蚕



粉碎時間
30秒
常温

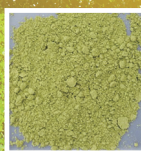


風乾土壌




粉碎時間
30秒
常温



微生物

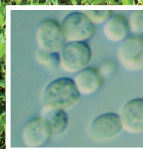

粉碎時間
90秒
4℃

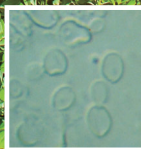

ヨーロッパ安全基準適合



テスト粉碎 と デモ は、
アプリケーションラボで **無料** で実施しています。
遠慮なくお問合せ下さい!



製造発売元

安井器械株式会社

本社・工場 〒534-0027 大阪市都島区中野町2-2-8

TEL.06-4801-4831 FAX.06-6353-0217

E-mail:s@yasuikikai.co.jp <https://www.yasuikikai.co.jp>

取扱店