

乾燥大麻の分析試料調整に最適!

『令和7年1月10日・医薬監麻発0110第5号』に対応



立体8の字®
商標登録第 6576850 号

秒速粉碎機

マルチビーズショツカー®

Multi-beads Shocker®

マルチビーズショツカー®は、科学捜査研究の分野で
四半世紀にわたる実績を有し、各種分析業務に貢献してまいりました。

マオウ



before

乾燥植物の
粉碎が
僅か**15秒**



after

毛髪ドーピング検査や毒物検査における
長年の信頼と実績!

使い捨て密閉プラスチック容器内で
粉碎・攪拌・混合が可能!

秒速で一度に多検体処理が可能!

96well~100mlまでのディスパチューブをラインナップ!!

粉碎チューブ一例




MB3000シリーズ

☑️ 卓上型・省スペース

☒ 極静音設計 40dB以下

マウス大腿骨

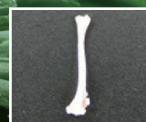

粉碎時間
10秒
液体窒素
条件下



豚筋肉



低温乳剤
作成が
15秒



(試料1gの10%乳剤作成)


心臓



粉碎時間
15秒
液体窒素
条件下



微生物

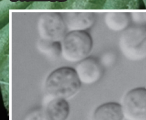

粉碎時間
90秒
4℃



型番	MB3200 (S)
サンプルホルダー	総合カタログ (P5参照)
破砕方式	立体8の字®原理
モータ回転数	0~4500rpm (1rpm単位設定)
タイマー	ON/OFF/CYCLE
本体外形寸法	422W×468D×451H (mm)・卓上型
電源	単相AC200V 50/60Hz 5A
重量	約32Kg



テスト粉碎 と デモ は、
アプリケーションラボで **無料** で実施しています。
遠慮なくお問合せください!



上記以外の仕様についてはお問い合わせください。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

製造発売元

安井器械株式会社

本社・工場 〒534-0027 大阪市都島区中野町2-2-8

TEL.06-4801-4831

FAX.06-6353-0217

E-mail:s@yasuikikai.co.jp

<https://www.yasuikikai.co.jp>