

植物研究に長年の実績!

微量精密分析の感度アップ!



立体8の字®
商標登録第 6576850号

秒速粉碎機

マルチビーズショッカー® Multi-beads Shocker®



MB3000シリーズ

Ⓛ 卓上型・省スペース ⓧ 極静音設計40dB以下

市販のチューブもご利用いただけます。
※詳細はお問い合わせください。

安価・タフな使い捨て容器内で植物、昆虫、微生物、土壌等の精密粉碎が可能!
各種サンプルの試料調整は、マルチビーズショッカー®にお任せください!

安価・タフな樹脂製使い捨て容器の種類も充実。
(96well/2ml/3ml/10ml/22ml/50ml/50mlロング/100ml)
容器の洗浄の手間不要で時間短縮/経費節減に貢献。

一度に多数の試料を同一条件で粉碎可能、
かつ1試料でもランサー無しで粉碎可能。

常温、低温(-10~20.0℃等)、液体窒素条件下等、
粉碎温度の制御が可能。

粉碎容器/粉碎媒体の材質もステンレス、ジルコニア、
タンゲステンカーバイドなど豊富なラインナップ。

コンピュータモータ(0~4,500rpm)により
1rpmごとの精密回転制御など豊富な制御が可能。

植物生葉




粉碎時間
10秒
液体窒素
条件下



蜜



粉碎時間
30秒
常温

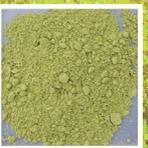

風乾土壌



粉碎時間
30秒
常温



微生物



粉碎時間
90秒
4℃



新発売!!

50ml・60ml・75ml・100ml用

らくらく開閉キャップ

手締めによるねじキャップの開閉ストレスを解消!
ねじキャップの締付トルク不足によるトラブルを防止!



製造発売元

安井器械株式会社

本社・工場 〒534-0027 大阪市都島区中野町2-2-8

TEL.06-4801-4831 FAX.06-6353-0217

E-mail:s@yasuikikai.co.jp <https://www.yasuikikai.co.jp>

取扱店